

# Afname Urinekweek

1



Vul het etiket in met uw gegevens en de afname-datum en afname-tijd. Schrijf duidelijk en in blokletters. Plak het etiket op de buis.

2



Schroef de dop goed op het potje. Zwenk het urinepotje rustig 3-5 maal.

3



Zet het potje rechtop op een vaste ondergrond (bijvoorbeeld op een tafel). Trek de beschermende sticker weg (niet verwijderen!).

4




Houd het potje goed vast en duw de dop van de buis in de opening van het afnamepunt. De naald gaat door de dop heen. Verwijder de buis van de naald.

5



Meng de buis door deze rustig 8-10 maal te zwenken. Kleef de beschermende sticker weer over de opening van het potje.

6

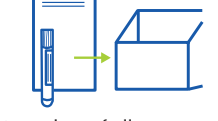

Controleer of alle gegevens en de dag/tijd waarop de urine is verzameld, correct zijn vermeld op de buis.

7



Gooi het restant van de urine in het potje weg in het toilet. Schroef de dop goed op het potje. Het potje kunt u daarna in de afvalcontainer werpen.

## Let op

Controleer of op het aanvraagformulier en de buis uw gegevens staan:

- ⊕ Afnamedatum en afname-tijd
- ⊕ Persoonsgegevens (uw achternaam, geboortedatum, geslacht en BSN-nummer)

# Instructie Urinekweek

**Uw (huis)arts of verloskundige heeft urineonderzoek aangevraagd. Nadat u de urine heeft ingeleverd wordt deze onderzocht in het laboratorium.**

## Afname instructies en gebruiksaanwijzing materiaal

Voor dit onderzoek dient u het middelste deel van uw urine op te vangen in het potje (verkrijgbaar via uw huisarts i.c.m. set); de zogenaamde middenstroomurine. Dat betekent dat u het eerste beetje urine in het toilet plast, het tweede gedeelte opvangt in het potje en het laatste deel weer in het toilet plast. Vul het potje ongeveer halverwege. Volg daarna de stappen op de achterzijde.

### Inleveren

Lever het materiaal na afname dezelfde dag in bij uw huisarts.

### Zorg ervoor dat de groene envelop compleet is:

- ⊕ Draai de dop van het buisje stevig vast om lekkage te voorkomen.
- ⊕ Plaats het buisje (met uw gegevens op sticker) in de plastic verpakking en verpak dit in het plastic zakje en plak deze dicht.
- ⊕ Zorg dat het aanvraagformulier volledig is ingevuld.
- ⊕ Stop het plastic zakje samen met het ingevulde formulier in de groene envelop.
- ⊕ Lever de envelop in bij uw huisarts.

### Uitslag

De resultaten van het onderzoek worden naar uw (huis)arts of verloskundige gestuurd. Hij/zij bespreekt met u de uitslag.

Heeft u vragen, neem dan contact met ons op:

✉ [info@diagnovum.nl](mailto:info@diagnovum.nl) 🌐 [www.diagnovum.nl](http://www.diagnovum.nl) ☎ 088 007 54 00

diagnovum  Bravis  
ziekenhuis