

# Afname Urine met gele monovette®

1




Trek het dopje van de monovette® af en bevestig de meegeleverde tip (dopje niet weggooien).

2



Dompel de tip in de middenstroomurine (uitleg zie achterzijde). Trek de zuiger naar boven tot aan de merkstreep.

3

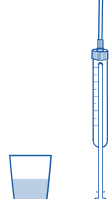


Draai de monovette® om met de tip naar boven. Trek de zuiger verder naar beneden.

4



Breek de zuiger af, verwijder de tip en plaats de dop terug op de monovette®. Gooi de zuiger in de afvalbak.

5

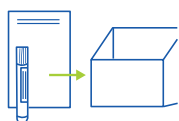

Controleer of alle gegevens en de dag/tijd waarop de urine is verzameld, correct zijn vermeld op de buis.

6



Gooi het restant van de urine in het potje weg in het toilet. Schroef de dop goed op het potje. Het potje kunt u daarna in de afvalcontainer werpen.

## Let op

Controleer of op het aanvraagformulier en de buis uw gegevens staan:

- ⊕ Afnamedatum en afnametijd
- ⊕ Persoonsgegevens (uw achternaam, geboortedatum, geslacht en BSN-nummer)

# Afname Urine met gele monovette®

**Uw (huis)arts of verloskundige heeft urineonderzoek aangevraagd. Nadat u de urine heeft ingeleverd wordt deze onderzocht in het laboratorium. In de verpakking vindt u een geel urine buisje met gele tip en een absorberend zakje. Daarnaast heeft u van uw huisarts een urinebeker meegekregen. Om de kwaliteit te waarborgen is van belang dat de afname op de juiste manier wordt uitgevoerd. Lees daarom deze instructie aandachtig door voordat u start met de afname.**

## Afname instructies en gebruiksaanwijzing materiaal

Voor dit onderzoek dient u de eerstestraals-urine op te vangen. Dit betekent dat u eerst in het potje plast en verder uitplast in het toilet. Vul het potje tot ongeveer halverwege. Volg daarna de stappen op de achterzijde.

### Inleveren

Lever het materiaal na afname dezelfde dag in bij uw huisarts.

### Zorg ervoor dat de plastic verpakking compleet is:

- ⊕ Draai de dop van het buisje stevig vast om lekkage te voorkomen.
- ⊕ Plaats het buisje (met uw gegevens op sticker) in het absorberend zakje en stop dit in de plastic verpakking (safetybag).
- ⊕ Zorg dat het aanvraagformulier volledig is ingevuld en stop dit in de buidel van de plastic verpakking.
- ⊕ Verwijder de plakstrip en plak de verpakking dicht.
- ⊕ Lever de plastic verpakking in bij uw huisarts.

### Uitslag

De resultaten van het onderzoek worden naar uw (huis)arts of verloskundige gestuurd. Hij/zij bespreekt met u de uitslag.

Heeft u vragen, neem dan contact met ons op:

✉ [info@diagnovum.nl](mailto:info@diagnovum.nl) 🌐 [www.diagnovum.nl](http://www.diagnovum.nl) ☎ 088 007 54 01

diagnovum 